


# MANUAL INSTRUCCIONES



## Bienvenido

El Set de Salud llegó para revolucionar el concepto de cuidado físico y estético, pero antes de usarlo lee detenidamente esta guía.

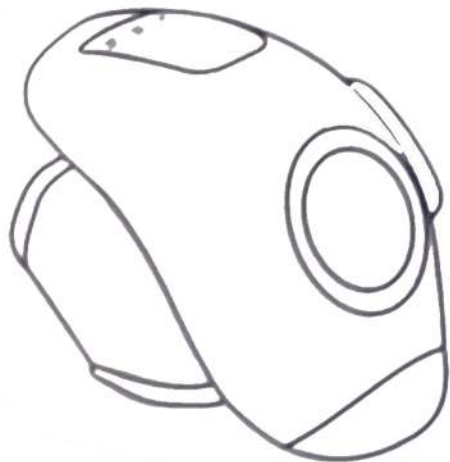

## Masajeador de rodilla

### **Funciones:**

Masajeador exclusivamente de uso doméstico

### **Encendido**

Toque el botón de encendido durante 3 segundos para iniciar, el indicador de trabajo se encenderá y el zumbador emitirá un pitido. Entrará en modo de espera.

### **Apagado**

Toque el botón de encendido durante 3 segundos para apagar, el indicador de trabajo se apagará y el zumbador emitirá un pitido.

### **Modo de Compresión Caliente:**

Toque la tecla de compresión caliente para cambiar el nivel de calentamiento. (Bajo, medio, alto, apagado)

### **Modo de Vibración:**

Toque la tecla de vibración para cambiar el nivel de vibración. (Bajo, medio, alto, apagado)

## **Descripción de los indicadores**

### **Indicador de encendido:**

El indicador de encendido está encendido cuando el dispositivo está encendido y apagado cuando está apagado.

### **Indicador de carga:**

El indicador de carga está encendido cuando se está cargando y apagado cuando está lleno.

### **Indicador de batería baja:**

El indicador de encendido comienza a parpadear cuando la batería está baja.

## **Conoce tu masajeador de rodilla:**

- Diseño ergonómico, línea fina con la curva articular.
- El masajeador de rodilla adopta un diseño amigable, tamaño ajustable y ajuste duradero.
- La tela del masajeador inteligente de rodilla está hecha de tela transpirable de alta elasticidad, que absorbe el sudor y no se moja, y la superficie es fácil de limpiar.
- Masaje caliente y vibración.

## Medidas de seguridad

- No lo uses con las manos húmedas.
- No uses el masajeador si cae al agua o se moja.
- No introduces ningún objeto en las aberturas del masajeador.
- No utilices el producto en ambientes con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados.
- No lo uses en la parte de arriba de la cabeza ni en partes duras o huesos.
- No cubras el masajeador al usarlo, se puede sobrecalentar.
- Deja descansar el masajeador entre series para evitar sobrecalentarlo.
- Para limpiarlo, utiliza un paño apenas húmedo y sécalo con una toalla.

## Especificaciones técnicas

- BioFamily garantiza que sus productos no tendrán defectos de material bajo condiciones de uso e instalación normal.
- Utiliza este dispositivo sólo para el fin para el cual fue diseñado.
- No coloques ni dejes caer dentro agua ni ningún otro líquido.
- Apaga este artefacto cuando no esté en funcionamiento.
- No pongas nunca en funcionamiento este artefacto si está dañado o no funciona correctamente; en ese caso, comunícate con el servicio técnico (whatsapp 692 27 60 15)
- Mantenlo alejado de superficies calientes.



## Presoterapia ocular

El masajeador incorpora un calefactor infrarrojo de alta tecnología. La luz infrarroja puede activar las células irradiadas, provocando la resonancia de las moléculas.

Esto mejora las fuerzas intermoleculares, lo que favorece la regeneración de tejidos, mejora la inmunidad, aumenta el suministro de oxígeno y mejora la circulación sanguínea, contribuyendo a una mejor salud general.


## FUNCIÓN DE CARGA

Carga completamente el dispositivo durante 3 horas antes de usarlo por primera vez. Conecta el cable de carga al dispositivo y el otro extremo a una fuente de alimentación. La luz de carga se encenderá en rojo mientras se carga.

Una vez que esté completamente cargado, el indicador de carga se iluminará en azul.

**Importante: No enciendas el masajeador mientras se está cargando.**

## FUNCIÓN DE LOS BOTONES

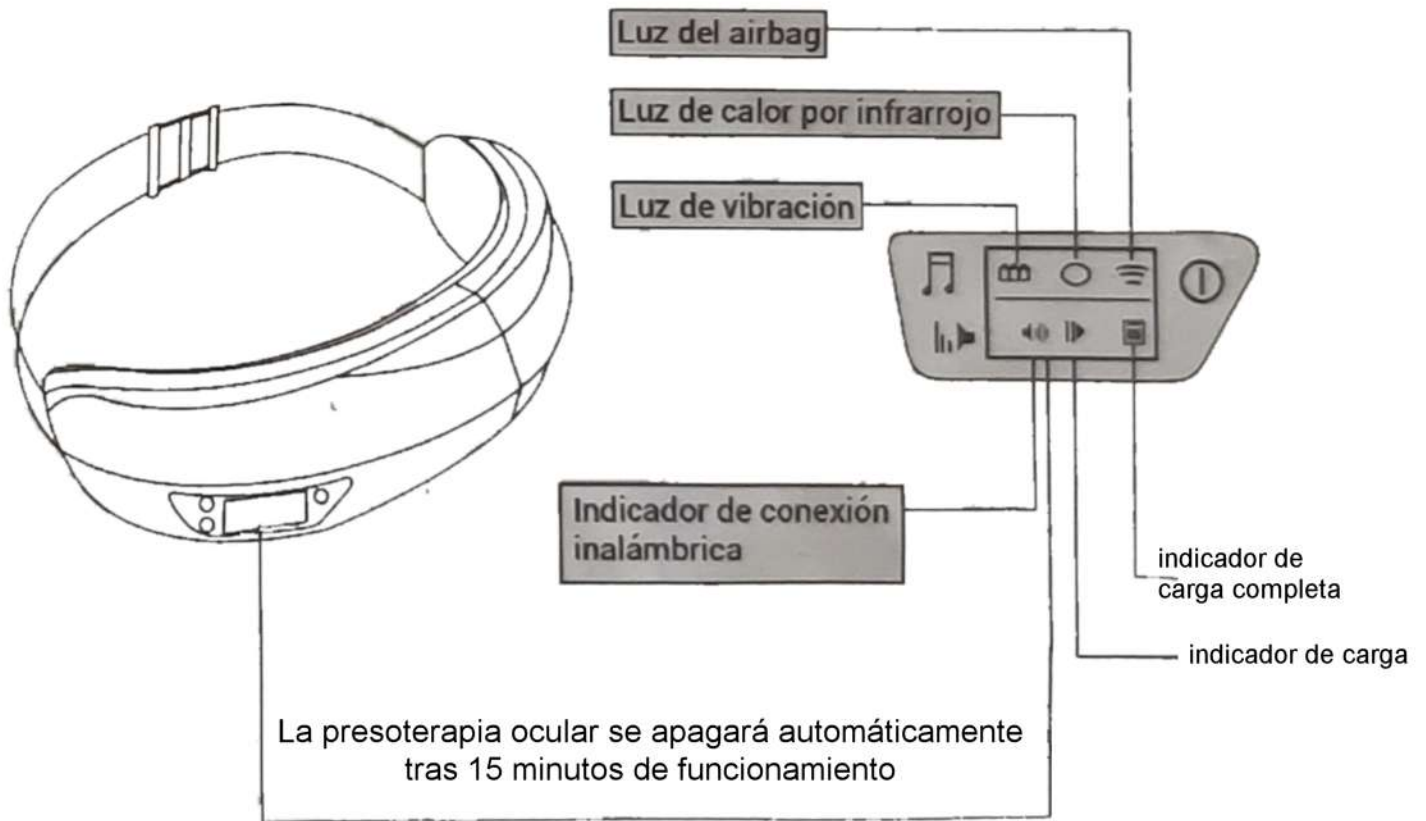

Mantener pulsado para encender/apagar el dispositivo  
Pulsarlo una vez para cambiar el modo



Mantener pulsado para subir el volumen  
Pulsarlo una vez para reproducir la siguiente pista



Mantener pulsado para bajar el volumen  
Pulsarlo una vez para reproducir la pista anterior


## FUNCIÓN DE CARGA

Carga completamente el dispositivo durante 3 horas antes de usarlo por primera vez. Conecta el cable de carga al dispositivo y el otro extremo a una fuente de alimentación. La luz de carga se encenderá en rojo mientras se carga. Una vez que esté completamente cargado, el indicador de carga se iluminará en azul.

**Importante: No enciendas el dispositivo mientras se está cargando.**

## MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Dispone de 5 modos de funcionamiento:

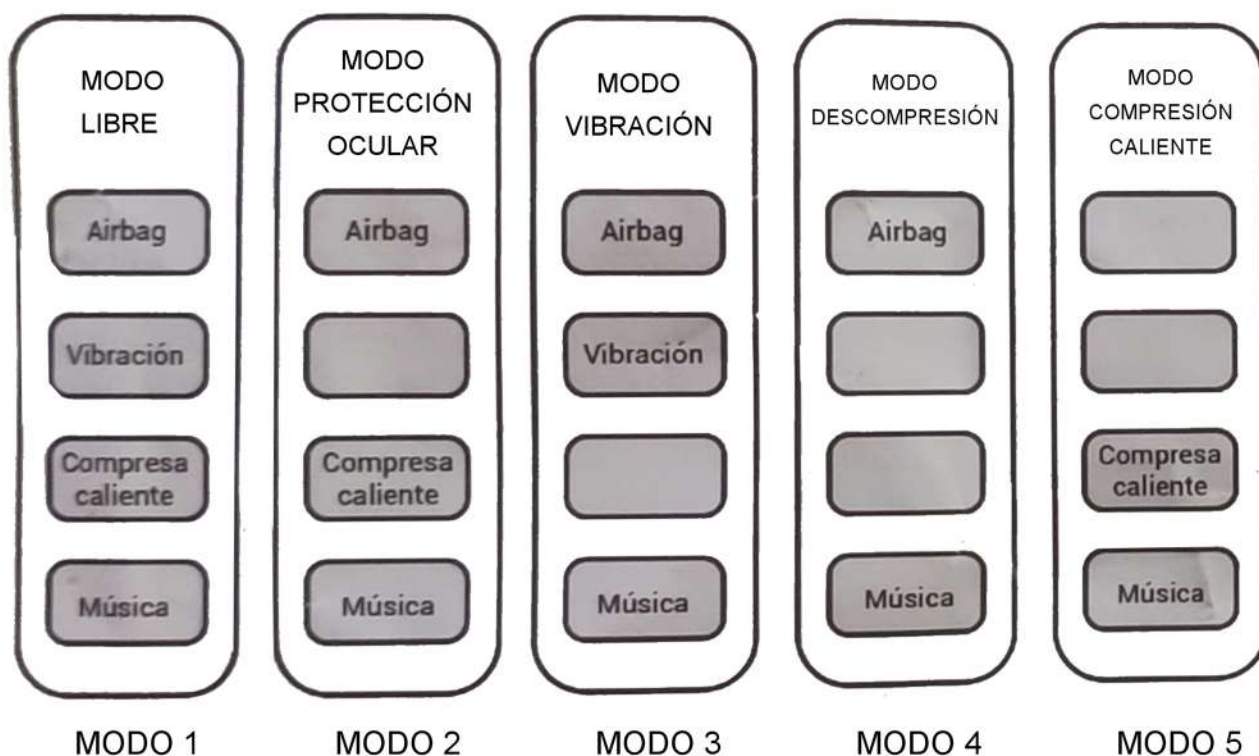

La función Bluetooth se activa automáticamente al encender el dispositivo. Si no conectas tu teléfono, la presoterapia ocular reproducirá música ambiental. Una vez conectado el teléfono al dispositivo, podrás reproducir tu música o audio favorito a través de él.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No usar por personas con síntomas de enfermedades oculares.
- Está contraindicado para personas con enfermedades oculares graves como cirugía ocular, glaucoma, cataratas y desprendimiento de retina.
- No mojar el producto con agua. Limpiarlo con un algodón empapado en alcohol.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si no puedes encender el dispositivo, comprueba lo siguiente:

- ¿La batería está cargada? Si no es así, carga el dispositivo.
- ¿Está bien conectado el cable de carga? Si no es así, asegúrate de que la conexión sea correcta.
- ¿Está la batería interna en buen estado? Verifique el estado de carga de la batería. Si parece dañada, contacte a nuestro servicio de cliente. No intente desmontar o reparar el dispositivo por sí mismo.

## **CONTRAINDICACIONES**

- No se recomiendan en casos de enfermedades oculares graves como glaucoma, cataratas o desprendimiento de retina, infecciones o inflamaciones oculares agudas, uso de lentes de contacto intraoculares, y la presencia de lesiones o hipersensibilidad en la zona periocular.
- Las personas con marcapasos, problemas cardíacos o epilepsia no deben usar dispositivos que generen impulsos eléctricos.
- Uso recomendado: Es de 10 minutos por sesión, con una frecuencia de uso diario o varias veces por semana, especialmente para quienes pasan mucho tiempo frente a pantallas o tienen problemas de fatiga visual, bolsas y ojeras.

## **ADVERTENCIAS**

- Lea atentamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.
- Antes de usar el producto, asegúrese de que la tensión eléctrica de su red sea compatible con la del dispositivo.
- No lo use sin la carcasa o el cable de alimentación.
- No introduzca ningún objeto en el espacio entre el cabezal de masaje y la carcasa.
- Si hay suciedad o elementos externos en el dispositivo, límpielo con un paño húmedo antes de usarlo para evitar lesiones en los ojos.
- No utilice el masajeador ocular en lugares húmedos o con calor excesivo, como baños o saunas.
- Evite que el producto entre en contacto con agua o cualquier otro líquido para evitar cortocircuitos y posibles accidentes.
- Desconecte el producto de la red eléctrica después de cada uso o antes de limpiarlo para prevenir daños al equipo o lesiones.
- No enchufe ni desenchufe el producto con las manos mojadas.
- No enchufe ni desenchufe el cable con fuerza desmedida.
- No dañe ni modifique el circuito del producto.
- Si se produce un corte de energía mientras está utilizando el producto, deje de usarlo inmediatamente para evitar lesiones en caso de que la corriente se restablezca repentinamente.
- Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios recomendados por el fabricante.
- No lo guarde al aire libre.
- No aplique demasiada fuerza al utilizar este producto para evitar lesiones.
- Espere al menos una hora antes de dormir después de usar el masajeador.
- Si observa alguna anomalía en el producto durante su uso, deje de usarlo y consulte con BioFamily.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- No permita usarlo siempre que sea posible a niños; un adulto responsable debe garantizar que no jueguen con el aparato.

- Si el adaptador de corriente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el servicio técnico autorizado o un profesional similar para evitar riesgos.
- Evite usar el producto inmediatamente después de un cambio brusco de temperatura ambiente, ya que esto podría afectar su funcionamiento.
- No use el producto en un entorno con polvo excesivo o gases corrosivos, ya que esto podría dañarlo.
- Si usa lentes de contacto, quíteselas antes de utilizar el producto para evitar molestias o daños en los ojos.
- Colóquese primero el masajeador de ojos y luego enciéndalo para garantizar un uso óptimo.
- No use lentes de contacto, adornos para el cabello, collares u otros accesorios mientras utiliza el producto para evitar daños o molestias.
- Este producto no está diseñado para el autodiagnóstico, tratamiento o uso comercial. Si necesita un diagnóstico o tratamiento médico, consulte con un profesional de la salud.
- Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado en la caja para cargar y operar el masajeador.
- No encienda el masajeador mientras se está cargando para evitar daños al dispositivo o riesgos de seguridad.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Voltaje: 5V/1A

Capacidad de la batería: 900mAh

Frecuencia: 46Hz

Versión Bluetooth: 5.3

Tiempo de carga: 3 horas

Tiempo de uso: Aproximadamente 1 hora



### Pistola estimulador muscular

Pistola masajeadora con 4 cabezales de masaje diferentes

LA CAJA INCLUYE:

1 pistola de masaje, 1 cable de carga USB, 1 cabezal de horquilla (para la columna vertebral), 1 cabezal de bala (para articulaciones), 1 cabezal redondo (para grandes grupos musculares), 1 cabezal plano (para todo el cuerpo)

### Características

-Fuente de alimentación: USB

-Voltaje de salida: 8,4 V

-Batería: célula de iones de litio recargable

-Voltaje de entrada: 5 V

-Potencia de salida: 16,8 Wh

## 6 niveles de ajuste:

- Σ Nivel 1: 2200 rpm (modo experiencia)
- Σ Nivel 2: 2400 rpm (modo de despertar muscular)
- Σ Nivel 3: 2600 rpm (modo de relajación de la fascia)
- Σ Nivel 4: 2800 rpm (modo de descomposición del ácido láctico)
- Σ Nivel 5: 3000 rpm (modo de masaje en profundidad)
- Σ Nivel 6: 3200 rpm (modo profesional)



## Descripción



## Instrucciones de uso

- (Cuando esté completamente cargado) Pulse el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo.
- Presione y mueva suavemente sobre la piel. La duración en cada parte debe ser de unos 60 seg.
- Utilice el dispositivo solo en los tejidos blandos del cuerpo para no causar dolor ni molestias. No lo utilice en la cabeza ni en ninguna parte dura o huesuda del cuerpo.
- Para cambiar el nivel, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado. Cada pulsación aumenta el nivel en uno. Al pulsar por primera vez el botón de encendido/apagado, el dispositivo comenzará a funcionar en el nivel 1.
- Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado. Cuando haya pasado por todos los niveles, el dispositivo se apagará.